

HIGH LINE

THE MFIP BRUSH

取扱説明書



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

目次

| | |
|------------------------|------|
| 取扱説明書に関するご注意 | P3 |
| 正しく安全にご使用いただくために | P3～4 |
| 使用前のご注意 | P5 |
| 使用中のご注意 | P6 |
| 保守・点検のご注意 | P7 |
| 各部の名称 | P8 |
| 本体操作方法 | P8 |
| トリートメント方法 | P9 |
| トリートメント手順 | P10 |
| 製品仕様 | P11 |

取扱説明書に関するご注意

◆この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、本機器を安全にご使用いただくために大変重要です。本機器を他の方に貸与または贈呈される際は、必ずご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただくようお願いください。


正しく安全にご使用いただくために

ご使用の前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような絵表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。
※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号



してはいけない「禁止」を示しています。
※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

正しく安全にご使用いただくために

⚠ 警告

事故や体調不良などを防ぐために

◆ 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。



禁止

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器

● 以下の人は使用しないでください

- 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
- 発熱を伴う疾患・感染症疾病・急性疾患
- 菌の治療中
- エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
- 知覚・痛覚異常のある人
- ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
- ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
- てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
- 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人
- 目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上、ご使用ください）
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 幼児・自分で意思表示のできない人
- 酒気帯び・二日酔いの人
- 眠気を誘う薬を服用中の人
- 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
- 化学繊維でシミ・かぶれ等の肌トラブルのあった人
- 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
- エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
- 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

● 以下の部位には使用しないでください

- 指定された部位以外
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
- 病的なシミ・ホクロ・ウイルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 手術した部位・陰部・肛門・のどほつけ周辺・耳
- 脱毛や剃毛処理をした直後の部位











禁止

※ 通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。





使用前のご注意

⚠ 警告

| | |
|---|---|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">●他の美容器とは同時に使用しないでください。●美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本品は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途外に使用しないでください。●LED光を覗いたり、直視をしないでください。●同じ部位への連続使用はしないでください。 肌を傷つけたり、感染・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。●ペットには使用しないでください。 |
|  水場使用禁止 | <ul style="list-style-type: none">●浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かないでください。 |
|  水濡れ禁止 | <ul style="list-style-type: none">●水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。 (感電・火災・故障の原因) |
|  濡れ手禁止 | <ul style="list-style-type: none">●濡れた手で触らないでください。 (感電・けがの原因) |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">●引火性のものの近くで使用しないでください。 ※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど●専用アダプター以外で使用しないでください。 専用アダプターを他の機器に接続しないでください。 (火災・感電・故障の原因) |
|  プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none">●アダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。コードを持って抜き差ししないでください。●アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。 |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">●アダプターコードを傷めないでください。 ※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど (火災・感電・故障の原因)●たこ足配線をしないでください。 (発熱・火災の原因) |
|  必ず守る | <ul style="list-style-type: none">●必ず家庭用コンセントで使用してください。●アダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。 |

使用中のご注意

⚠ 警告

| | |
|---|---|
|  プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none">● 次の場合は、使用を中止し、電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。<ul style="list-style-type: none">・地震・雷・本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形 |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">● 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。● 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。 ※携帯電話・テレビなど |
|  分解禁止 | <ul style="list-style-type: none">● 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗にご相談ください。 |
|  必ず守る | <ul style="list-style-type: none">● 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。 ※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など● 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。● ヘッドは押し付けず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。● 目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。● 使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。 |






⚠ 注意

本体使用上のご注意 以下の項目をよく読んでご使用ください

| | |
|---|--|
| 1 | <p>トリートメントは1部位=週1回行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 1週～2週目は週に1-2回お手入れしてください。その後の3週目からは肌の調子に合わせてお手入れしてください。● 過度なお手入れはかえって肌によくありません。 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">● トリートメントは、クレンジングや洗顔・洗髪を行い、化粧や皮脂等の汚れを落としうえて、専用美容液・ジェルを塗布してからご使用ください。 |
| 3 | <p>肌の状態は、体調によっても異なります。</p> <ul style="list-style-type: none">● 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。 |

保守・点検のご注意

⚠ 警告

| | |
|---|--|
|  プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none">● 本体を掃除するときはアダプターを本体とコンセントから抜いてください。 (火災・故障の原因) |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">● アダプターやプラグにピンやほこりを付着させないでください。 (火災・感電・故障の原因)● 落としたり、ぶつけたりしないでください。● 収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。 |
|  プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none">● 使用しないときは必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。 (火災・故障の原因) |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">● お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。● 次のような場所に保管しないでください。<ul style="list-style-type: none">・直射日光があたる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く |
|  必ず守る | <ul style="list-style-type: none">● お掃除の仕方<ul style="list-style-type: none">・水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。・硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。※ アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。※ 美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。 |

点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際は、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等)故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

各部の名称


【製品構成】




本体操作方法

- ①AC アダプターを本体・コンセントに差し込みます。
- ②モードの選択
〈MFIP〉〈SP〉いずれかのボタンを押すとレベル1になり、トリートメントを開始します。
- ③レベルの選択
選択したモードのボタンを押すことで、レベルを変更できます。
※〈MFIP〉モード選択時はレベルランプが点滅・〈SP〉モード選択時はレベルランプが点灯
※初めて使用される際はいずれのモードもレベル1から開始し、心地良いと感じるレベルで、トリートメントを行ってください。
※レベルやモード変更の際は、使用中のモードボタンを押し、電源を切ってください。
その後、レベル調整や各モードの選択を行ってください。
- ④2種類のモードからVR(バイブレーション)の選択

各部の名称

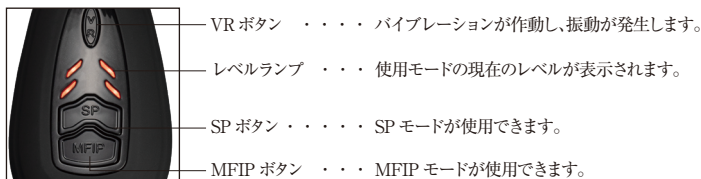

レベルランプについて

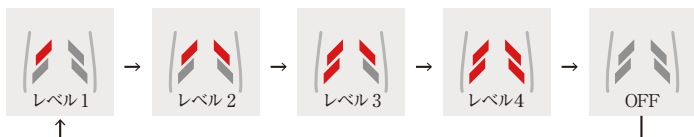

トリートメント方法

トリートメント前

- ①洗髪後にタオルドライを行い、頭皮を清潔な状態にしてください。
- ②身につけている貴金属類(時計・指輪・ピアス・ネックレス等のアクセサリ類)や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。

トリートメント方法

◆基本トリートメント：〈SP モード 5 分〉+〈MFIP モード 5 分〉= 合計 10 分

- ①トリートメント部位(あご先～後ろ肩)頭皮専用美容液または精製水を塗布し、トリートメントを行ってください。
※トリートメントの途中で乾きを感じたら専用美容液を付け足してください。
※トリートメントを行う部位(頭皮)に本体のヘッドを全て密着させ、ゆっくりと動かしてください。
※1日に10分以上のご使用はお控えください。
※使用中、ヘッドに汚れ等が付着してざらつく場合には、柔らかい布やティッシュ等で拭き取ってください。




トリートメント後に

- ①トリートメント後、頭皮に残った専用美容液は、指の腹で優しくマッサージをするように馴染ませてください。
- ②本体から AC アダプターを外して汚れを拭き取り、保護キャップをはめて安全な場所で保管してください。

トリートメント手順

◆トリートメント時間: 合計 10 分

※5 分経過すると自動的に電源が OFF になります。

| | |
|---|--|
| <div>1</div>  | <p>【あご先～後ろ肩】 SPモードであごの先から耳下までフェイスラインに沿ってスライドさせます。 反対側も同様に行ってください。 (約1分)</p> |
| <div>2</div>  | <p>【側頭部～後頭部】 SPモードで左半分の側頭部から後頭部へ円を描くようにくるくるとマッサージしながら当て、スライドさせていきます。 反対側も同様に行ってください。 (約4分)</p> |
| <div>3</div>  | <p>【前頭部～頭頂部】 MFIPモードに切り替えて前頭部から頭頂部へスライドさせながらご使用ください。 (約5分)</p> |

注意事項

- ・ご使用時は LED の光とヘッドがまんべんなく当たるよう、肌にしっかり密着する様に押し当ててください。
- ・本機器はゆっくり動かしてください。
- ・最初はレベル 1 から開始し、慣れてきたら心地良いと感じるレベルまで上げてください。
- ・10 秒に一度「ピッ」という音が鳴ります。施術時間の目安に動かしてください。
- ・電源を入れ、5 分経過すると、自動的にタイマーで電源が OFF になります。

製品仕様

仕様

| | |
|-------|---|
| 製品名 | HIGH LINE THE MFIP BRUSH (ハイライン ザ MFIP ブラシ) |
| 電源定格 | 入力AC 100~240V 50/60Hz 出力DC 12V・1.5A |
| 消費電力 | 最大12W |
| 出力周波数 | 80kHz |
| LED波長 | 赤620nm (±10nm) |
| 外形 | 最大198.4mm×53.8mm×83.6mm |
| 重量 | 約168g |
| タイマー | 5分 |

Top of the Beauty